



## Fiche intervention défibrillateur N° : 61699

Date : 23 févr. 2024

Intervenant : xxxxxxxxxxxx

Lieu intervention : Sur site

Etablissement : xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, France Site :

Responsable : xxxxxxxx

Tel : xxxxxxxx

Mail : xxxxxxxx@xxxx

Dispositif : Défibrillateur

N° inventaire :

Marque & modèle : Schiller PA1

N° série : 12799xxxxxxxx

Site / service :

### Etat dispositif et accessoires

Boîtier :  Conforme

Messages vocaux :  Conforme

Sérigraphies :  Conforme

Test intégré :  Conforme

Clavier / interrupteur / bouton choc :  Conforme

Signalitique :  Sans

Voyant / affichage :  Conforme

Boîtier mural / support :  Sans

Connecteur électrodes :  Conforme

Trousse d'urgence :  Sans

Electrodes adultes / pédiat :  Conforme /  Sans

Pile :  Conforme

### Test défibrillateur

Détection Fib. Ventriculaire :  Conforme

Contrôle impédances (message) :

Energie sélec. 1 : 150 J +/-15% Energie délivrée 1 : 147 J

355 Ohm :



Energie sélec. 2 : 200 J +/-15 % Energie délivrée 2 : 196 J

246 Ohm :

Energie sélec. 3 : 200 J +/-15 % Energie délivrée 3 : 196 J

5 Ohm :

Temps charge NRJ Max :  Conforme

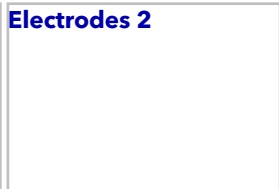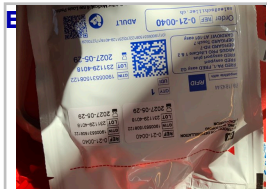

Le :

Etat défibrillateur :  Conforme

### Observations

Observations : Maintenance 3 ans effectuée (19/01/24)  
Remplacement électrodes



Traçabilité testeur : ETM2, Fluke Impuls  
6000D N° 1534044 étal. juin 2023  
Traçabilité accessoires :

*Si un défibrillateur est déclaré "Non Conforme !!", il ne doit pas être remis en service à compter de la date du contrôle. BIO MC médical se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation d'un défibrillateur déclaré "Non Conforme". Une copie de la fiche vous a été envoyée par mail à l'adresse indiquée.*